
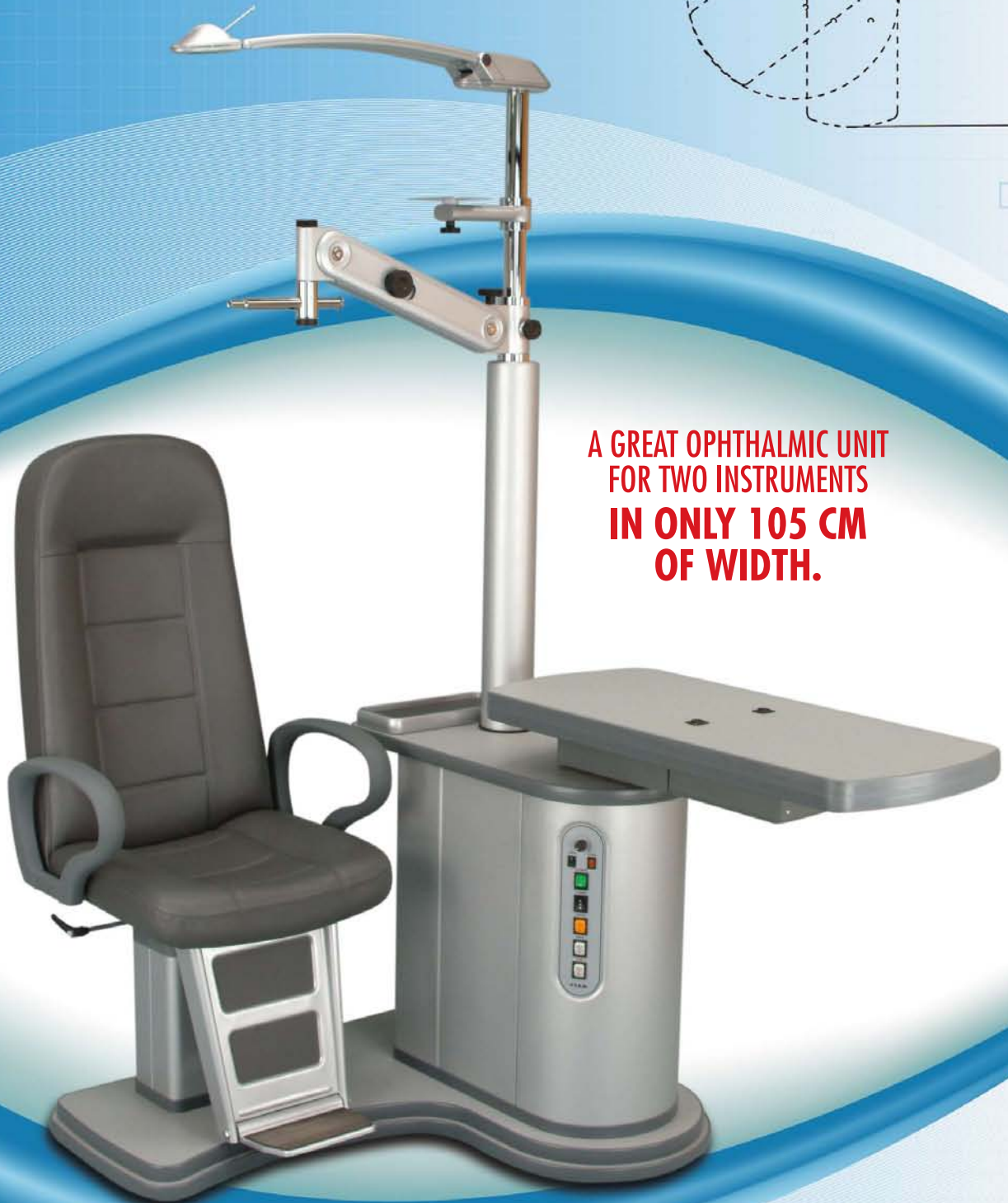


Panvisus COMPACT Rondo

UN GRANDE RIUNITO OFTALMICO PER DUE STRUMENTI
IN SOLI 105 CM DI LARGHEZZA.

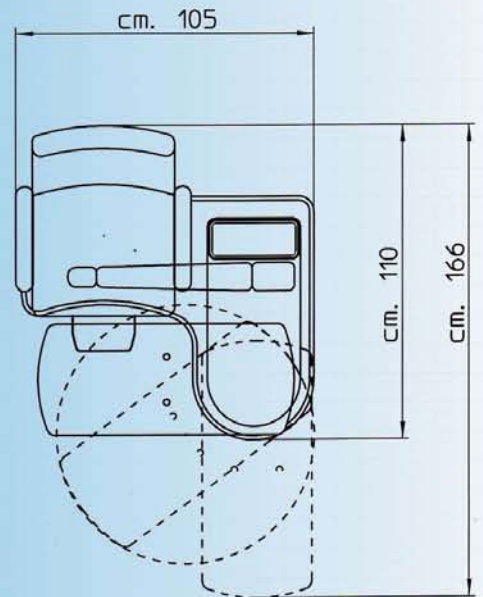

**A GREAT OPHTHALMIC UNIT
FOR TWO INSTRUMENTS
IN ONLY 105 CM
OF WIDTH.**

Panvisus COMPACT Rondo

Meccanismo di doppia rotazione del pianale, perfetta ergonomia, robustezza e facilità d'uso in soli 105 cm di larghezza.

Table top with double rotation mechanism, perfect ergonomics, sturdiness and ease of use in only 105 cm of width.



PANVISUS COMPACT RONDO è un riunito oftalmico, di dimensioni compatte e munito di pianale per due strumenti con sistema a doppia rotazione, che garantisce una perfetta ergonomia, robustezza, stabilità e facilità d'uso, pur avendo un ingombro in larghezza di soli 105 cm.

PANVISUS COMPACT RONDO non solo rappresenta la soluzione ideale nel caso, sempre più frequente, di sale ambulatoriali con spazi ristretti, ma, grazie al suo design piacevole ed armonioso, è in grado di conferire decoro e prestigio a qualunque ambiente di lavoro.

PANVISUS COMPACT RONDO, fabbricato interamente in acciaio e legno, è disponibile o con colonna munita di lampada alogena e porta proiettore regolabile in altezza e direzione, o con colonna munita di faretto e piastra porta proiettore ad altezza fissa. E' disponibile inoltre nella versione sinistra, cioè con poltrona e colonna in posizioni invertite.

PANVISUS COMPACT RONDO può essere fornito con cinque diversi modelli di poltrone con i rivestimenti previsti nel campionario F.I.S.O.. Viene fornito di serie in colore grigio chiaro goffrato oppure, su richiesta, in tutti i colori del campionario F.I.S.O..

PANVISUS COMPACT RONDO is an ophthalmic unit of compact dimensions and provided with table top for two instruments with double rotation mechanism. It ensures perfect ergonomics, sturdiness and ease of use, despite its overall width of only 105 cm.

PANVISUS COMPACT RONDO not only represents the ideal solution in the case, more and more frequent, of narrow rooms, but, thanks to its pleasant and harmonious design, it is able to confer decorum and prestige to every room.

PANVISUS COMPACT RONDO, entirely made of steel and wood, is available either with column provided with overhead halogen lamp and chart projector support adjustable in both height and direction, or with column provided with lamp spot and chart projector holding plate with fixed height. It is also available in the left-handed version, that is with chair and column in inverted positions.

PANVISUS COMPACT RONDO is available in five different chair models with all upholstery colours contained in F.I.S.O.'s pattern-book. It usually comes with light grey finish or, on request, in any colour shown in F.I.S.O.'s pattern-book.

Caratteristiche e corredo standard:

Pianale per due strumenti con meccanismo di doppia rotazione • Poltrona ad elevazione elettrica con rivestimento in skai grigio forellato o nero • Lampada a luce alogena • Supporto per proiettore regolabile in altezza e direzione • Vaschetta di servizio per oftalmoscopio e skiascopio • Trasformatore per alimentazione strumenti • Vernice goffrata grigio chiaro.

Accessori e versioni speciali:

Braccio autobilanciato per forottero sistema F.I.S.O. • Lampada a luce alogena con regolatore di intensità • Telecomando a pedale aggiuntivo per elevazione poltrona • Tutti i colori di vernice e rivestimento poltrone previsti nei campionari F.I.S.O. • Versione con colonna con faretto e piastra porta proiettore • Versione con colonna e poltrona in posizioni invertite.

Features and standard equipment:

Table top for two instruments with double rotation mechanism • Chair with electrical height adjustment with either black or grey dotted skai upholstery • Overhead lamp with halogen bulb • Chart projector support adjustable in both height and direction • Tray for ophthalmoscope and skiascope • Transformer for instrument power supply • Light grey finish.

Accessories and special versions:

Phoropter arm with counterbalancing mechanism by F.I.S.O. • Overhead lamp with halogen bulb with adjustable light intensity • Additional foot switch control for chair up/down movement • All colours of both finish and chair upholstery shown in F.I.S.O.'s pattern-book • Version with column equipped with lamp spot and chart projector support metal plate • Left-handed version.



Poltrona Gloria
Gloria chair



Poltrona Liberty
Liberty chair



Poltrona Prima
Prima chair



Poltrona Sonne
Sonne chair



Poltrona Alles
Alles chair

